




דיספנסר לניהול חכם של ויטמינים ותרופות


השימוש בדיספנסר רק כאשר ריבוע הבחירה מופנה כלפיך.

בחירת זמני לקיחה - סיבוב החלק העליון בכיוון החץ


בחירת ימי לקיחה / סגור / מילוי - סיבוב החלק התחתון בכיוון החץ

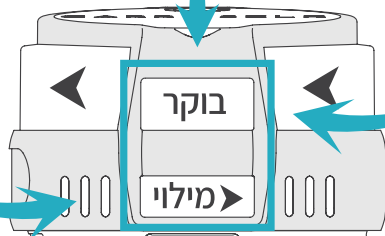


4 מחסניות לכדורים ל-4 זמני לקיחה

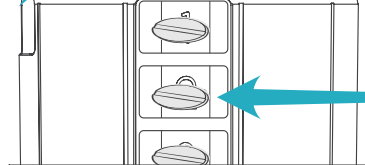

פתיחה / סגירה

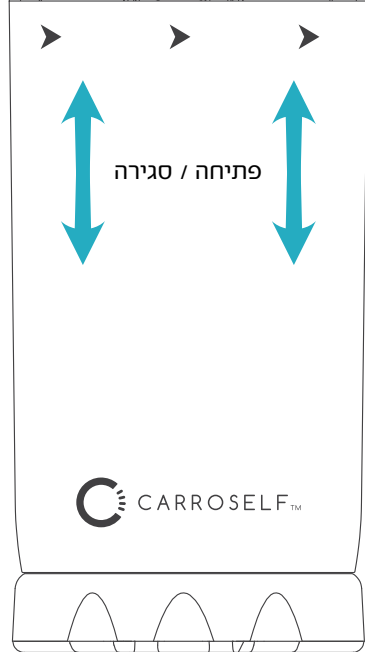

תפס להוצאת מחסניות מהדיספנסר

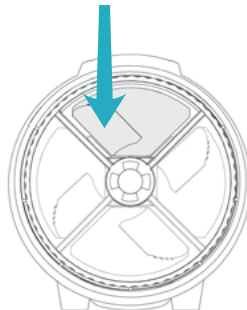

חיבור קופסאת TO GO לדיספנסר



הוראות בטיחות

הטבעת התחתונה של סימון זמני הלקיחה למצב "סגור" כדי למנוע נפילת כדורים.

אין לשחק / לעקם ללא צורך בתפס ההוצאה של המחסניות ובתפסי הסגירה של קופסת המחסניות.

המשתמש אחראי על סידור הכדורים והשימוש הנכון בדיספנסר - הכנסה והוצאה ו/או שימוש הכדורים המתאימים בזמן הנכון.

אחריות ל-12 חודשים מתאריך הרכישה, לא כולל שבר או שימוש לא תקין בהתאם להסברים.

* ההנחיות נכתבו בלשון זכר והן מתייחסות לזכר ונקבה כאחד

- שמור במקום מוצל וקריר
- ניקוי במטלית לחה, ללא אלכוהול!
- לשימוש מגיל 16 ומעלה
- בזמן השימוש בדיספנסר, ריבוע הבחירה חייב להיות מופנה כלפי המשתמש
- את המחסניות בלבד ניתן לשטוף במים/במדיח ולייבש היטב
- במידה ואסור להוציא כדורים מאריזתם המקורית, ניתן לגזור סביב הכדור ולהכניס לתא המתאים באריזתו המקורית.
- ככל הזדמנות, כאשר אתה פותח את הדיספנסר לבדיקת מצב הכדורים, עליך להעביר את


מדבקות זמני לקיחה ורשימת שם

לנוחיותך, מצורפות מדבקות התאמה אישית של זמני הלקיחה אותן ניתן להדביק ולשנות בטבעת העליונה, בהתאם לזמני הלקיחה האישיים שלך. בנוסף, מצורפות מדבקות לשם המשתמש, לצורך זיהוי בתוך המשפחה כאשר יש יותר ממשתמש אחד. ניתן לרשום שם והדביק במקום המיועד לכך בדיספנסר.



- ← 4 זמני לקיחה ביום
- ← 2 זמני לקיחה ביום
- ← זמן לקיחה 1 ביום
- ← מדבקות לכתיבת שם

אביזרים נוספים - בהזמנה נוספת

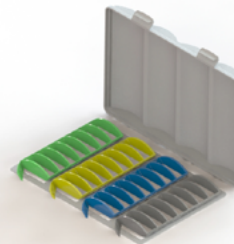

אירגונית

מתאים למי שצריך עזרה באירגון הכדורים, או למי שאוהב להיות מוכן. קופסא לאירגון ואיחסון הכוללת 4 מחסניות נוספות למילוי נוח והכנה מראש.



ערכה TO GO

הכדורים שלך תמיד איתך! קופסת כדורים קטנה המחולקת לארבעה תאים + חוצה כדורים. מתחבר לדיספנסר בחלק התחתון.









שעון תזכורת

כדי שלא תשכח שום כדור! שעון חכם שיזכיר לך לקחת את הכדורים / ויטמינים בהתאם לזמנים שתגדיר מראש. כולל 6 התראות, צפצוף והבהוב. מתחבר לדיספנסר בחלק העליון.

הוראות מילוי ויטמינים /או כדורים

1. השימוש בדיספנסר יתבצע רק כאשר ריבוע הבחירה (B) מופנה כלפיך.
בחר "מילוי" בטבעת התחתונה: אחוז את הכיסוי החיצוני (C) וסובב בכיוון החץ.
2. בחר זמן למילוי: סובב בכיוון החץ את הטבעת העליונה (D) לזמן המילוי המתאים במלבן הבחירה העליון: בוקר / צהרים / ערב / לילה.
3. פתח את המכשיר: אחוז בחלקו העליון של המכשיר, ומשוך את הכיסוי החיצוני (C) כלפי מטה.
4. הנח את המכשיר בשכיבה על השולחן כאשר ריבוע הבחירה (B), והחלק הפתוח במיכל המילוי פונים כלפי מעלה.

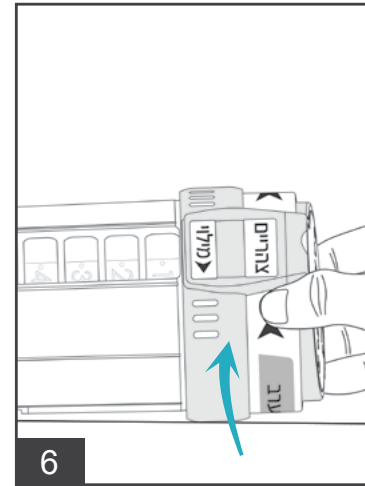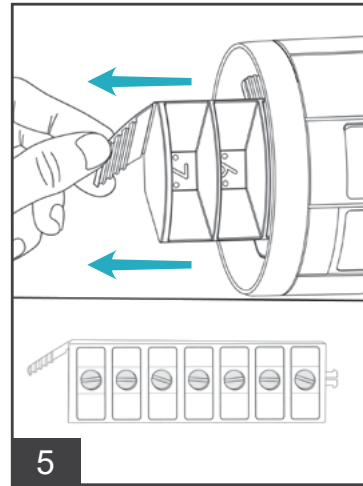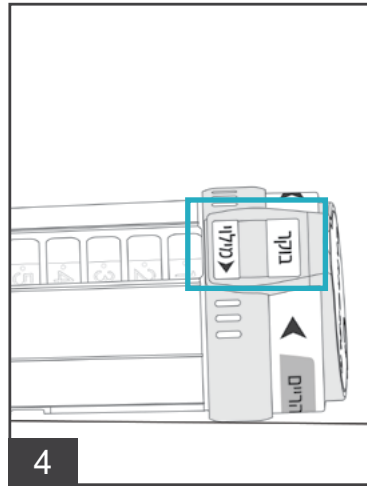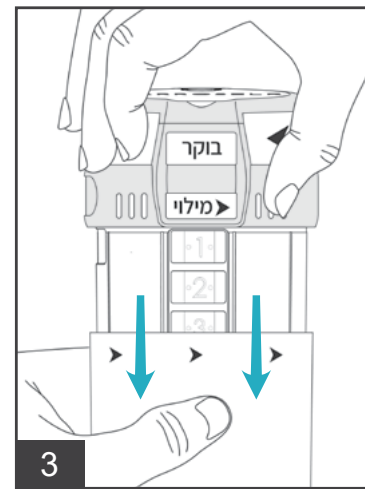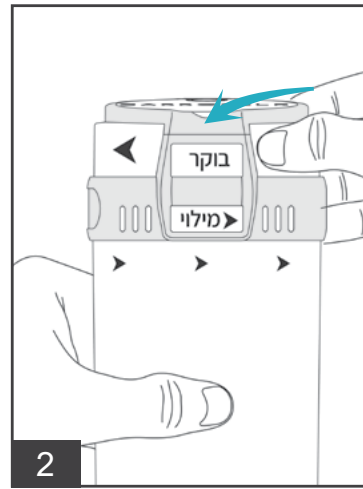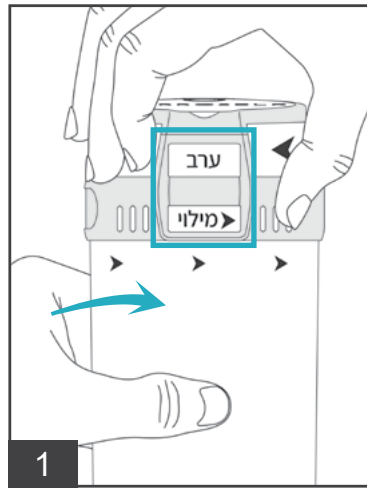



5. אחוז בידיית האחיזה של מחסנית המילוי (F), ומשוך את המחסנית הנבחרת החוצה.
מלא את מחסנית המילוי (G) לפי הצורך, והחזר למקומה עד הישמע צליל הנעילה.
- הקפד למלא את הכדורים הנכונים בהתאם לזמן שהמחסנית מייצגת.**

6. המשך את פעילות המילוי כאשר המכשיר מונח על השולחן ומלבני הבחירה מופנים כלפי מעלה: סובב בכיוון החץ את ריבוע הבחירה העליונה (B) לזמן הבא. הוצא את המחסנית (G) הבאה, מלא והחזר למקומה. חזור על פעילות זו עד אשר כל המחסניות מלאות.

7. סגור את המכשיר: סובב בכיוון החץ את הטבעת התחתונה (E) למצב סגור. מילוי הכדורים הושלם. החזר את הכיסוי החיצוני (C) למכשיר.



לקחת ויטמינים /או כדורים סדירה

1. (איור מס' 1) השימוש בדיספנסר רק כאשר ריבוע הבחירה (B) מופנה כלפיך.
לבחירת יום הלקיחה אחוז את הכיסוי החיצוני (C) וסובב את הטבעת התחתונה (E) בכיוון החץ למצב הרצוי במלבן הבחירה התחתון.
2. (איור מס' 2) לבחירת זמן לקיחה סובב בכיוון החץ את הטבעת העליונה (D) לזמן הלקיחה המתאים.
3. (איור מס' 3) אחוז במכסה העליון (A) ומשוך את הכיסוי החיצוני (C) כלפי מטה עד הסוף.
4. (איור מס' 4) שפוך את תכולת התא הפתוח ליד. נפתח פתח אחד בקופסא בהתאמה ליום הלקיחה וזמן הלקיחה.
5. (איור מס' 9) סגור את הכיסוי החיצוני (C). חזור על פעולה זו לפי זמני הלקיחה וימות השבוע בהתאמה.

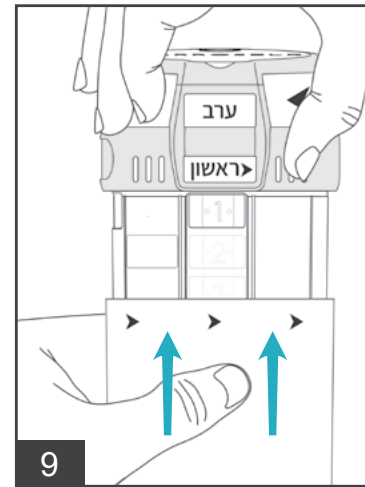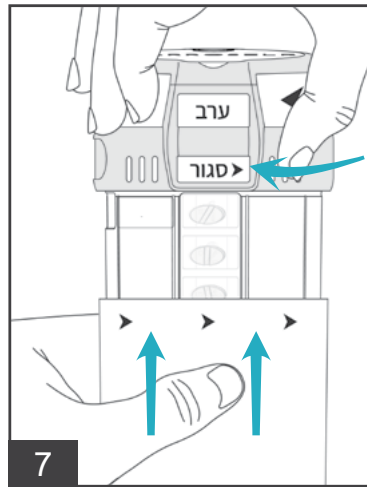

מקרא - דיספנסר

- A מכסה עליון / שעון תזכורת (ניתן להזמין בנוסף)
- B ריבוע הבחירה בעל שני החלונות
- C כיסוי חיצוני
- D טבעת עליונה לבחירת זמני לקיחה: בוקר / צהרים / ערב / לילה
- E טבעת תחתונה לבחירת ימות השבוע, מצב מילוי ומצב סגור
- F פתח להוצאת/ הכנסת מחסניות
- G 4 מחסניות בצבעים למילוי הכדורים
- H סימון עבור מדבקת שם

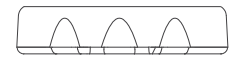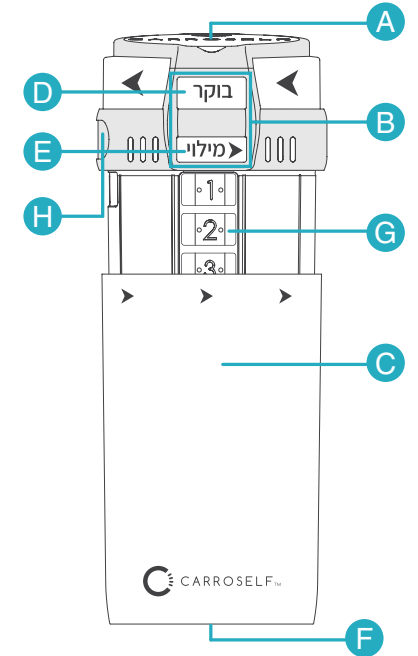

ניתן להוסיף ולחבר בתחתית הדיספנסר ערכת TO GO אותה ניתן להזמין בנוסף